

TUSPA

TRIPOLLAR
STOP V



TUSPA



TRIPOLLAR STOP V

El sistema de envejecimiento patentado y exclusivo de la marca TriPollar

TriPollar STOP V es un sistema antienvjecimiento no invasivo diseado para usarse en el hogar. El dispositivo combina tecnologas profesionales para tensar y suavizar la piel de la cara, el cuello y las manos.

Experimente una sensacion calida y relajante mientras el calentamiento localizado provoca una contraccion inmediata de las fibras de colageno en la dermis, al mismo tiempo que aumenta la actividad de los fibroblastos.



El tratamiento ayuda a la regeneracion de las fibras de colageno y elastina para tensar la piel y crear una apariencia mas joven y revitalizada desde el primer tratamiento.



RF


Fomenta la renovacion y regeneracion de la piel con calidez desde el interior



DMA

Activacion muscular dinamica

TUSPA

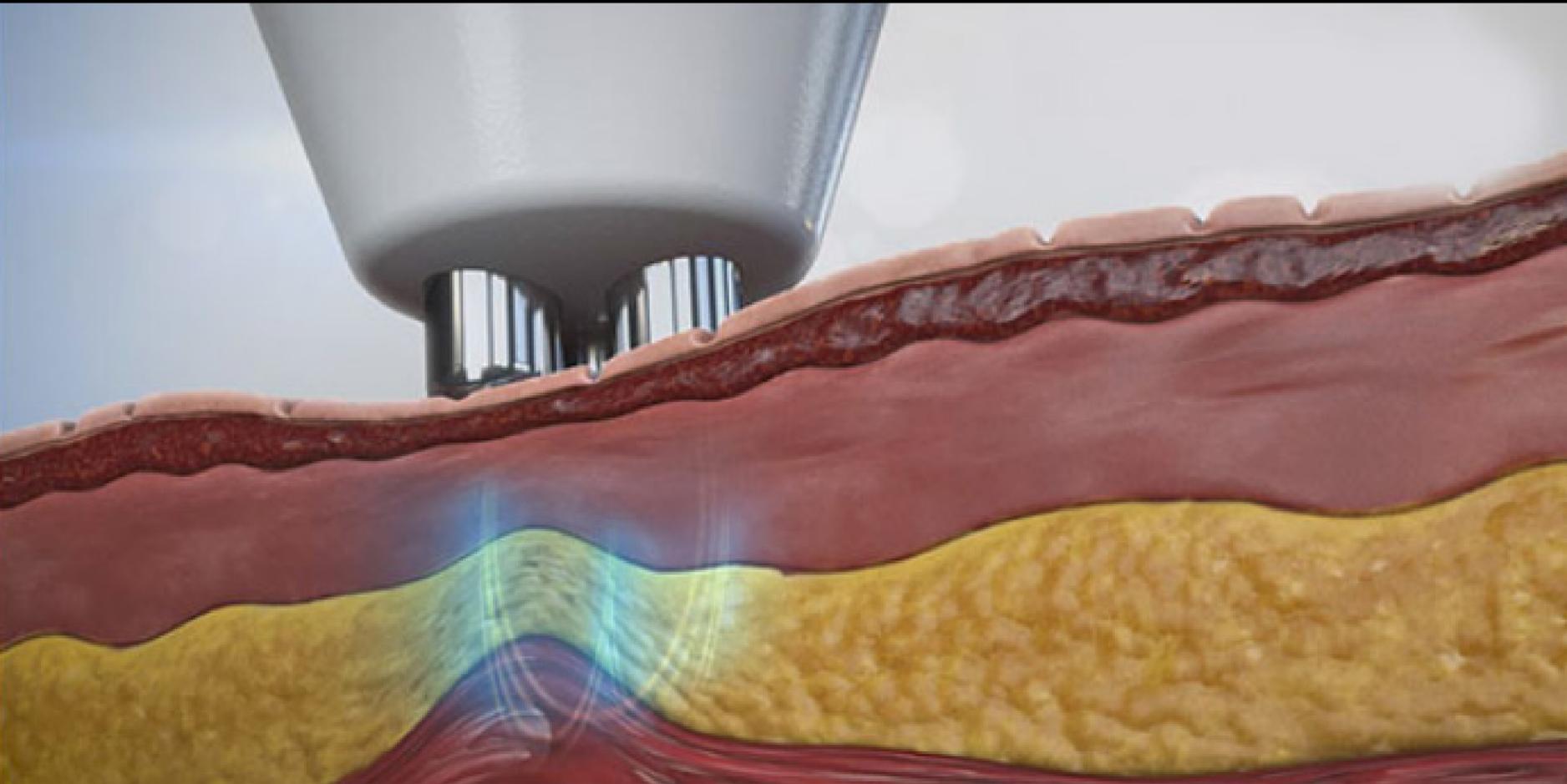

El modelo TriPollar STOP V también contiene Dynamic Muscle Activation para mejorar el tono de los músculos faciales y ayudar a crear un efecto de estiramiento facial, también conocido como “Lifting facial”.




DMA

Cuando se combina la tecnología Dynamic Muscle Activation (activación muscular dinámica) con radiofrecuencia, se obtiene un efecto de tonificación muscular que acelera el colágeno y que ayuda a tensar la piel y reducir la apariencia de líneas finas y arrugas.



TUSPA


BENEFICIOS

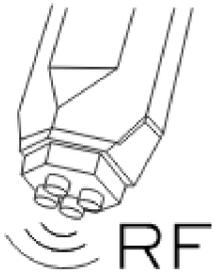


Resultados óptimos usando la mejor tecnología del mundo.



Tratamiento de la piel y remodelación de los rasgos faciales en un solo dispositivo

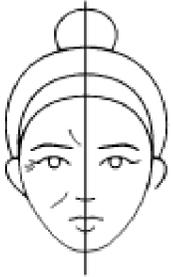

Resultados permanentes visibles e inmediatos

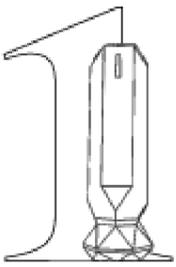

Líderes en el mercado en innovación de dispositivos domésticos




TUSPA

INSTRUCCIONES DE USO



Para comenzar, limpie el rostro o el área de tratamiento específica

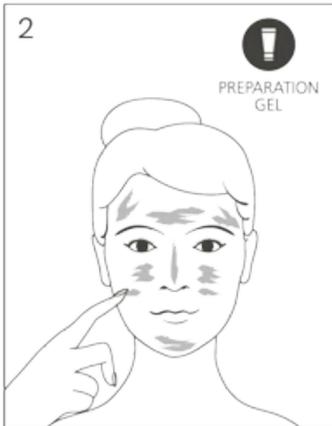

Aplique el gel de preparación TriPollar STOP V.



Mueva lentamente el dispositivo con movimientos circulares sobre cada área de tratamiento, calentando su piel a la temperatura óptima.



Mantenga los cuatro electrodos en contacto con la piel en todo momento. Repita hasta que se muestre la luz naranja y el indicador de sonido emita un pitido y muévase a un área adyacente.



Lave y retire el gel de preparación. Un tratamiento facial completo debería durar unos 20 minutos.