

TUSPA

TRIPOLLAR
STOP VX



TUSPA

TRIPOLLAR STOP Vx

El producto
antienvjecimiento
más vendido del mundo



TriPollar STOP Vx presenta lo último en tecnología de RF en la comodidad de su hogar.

Basada en la innovadora tecnología Multi-RF TriPollar y DMA, STOP Vx afecta a todas las capas de la dermis de manera homogénea para un tratamiento más rápido, seguro y efectivo.



Ofrece resultados estéticos de nivel profesional que son visibles y duraderos de forma inmediata.



MULTI-RF

Lo último en innovación de RF, la tecnología TriPollar Multi-RF apunta a una gama precisa de capas en la dermis



DMA

Activación muscular
dinámica

TUSPA

TIPOS DE TECNOLOGÍA



MULTI-RF

Multi-Radiofrecuencia TriPollar

Actúa incrementando el nivel de colágeno en la piel y en base a ello logra una reducción considerable de arrugas, líneas de expresión y flacidez (entre otros beneficios). Esta tecnología la puede aplicar sobre el rostro, cuello y también en manos.

Se usa con movimiento circular pequeños (3 cm diámetro aprox) y lentos y una vez enciende luz naranja, cambiar a sección adyacente y así hasta completar todo el rostro. Este proceso tomará unos 15 a 20 minutos.

Activación Dinámica del Músculo o DMA

Está destinada a tonificar el sistema muscular aponeurótico, el que agrupa músculos de la zona de mejillas y cuello, justo en la zona del contorno del rostro (línea de mandíbula), para trabajar el área donde aparece la Papada, que es por donde se aplica exclusivamente esta tecnología. Se usa con movimientos a lo largo de la mandíbula, puede partir del mentón hacia el lóbulo de su oreja, con movimiento largo pero lento (sentirá unos pulsos similares a pulsos eléctricos).




DMA



TUSPA


BENEFICIOS

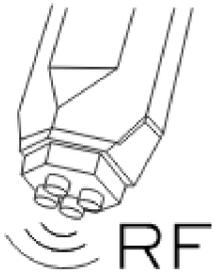


Resultados óptimos usando la mejor tecnología del mundo.



Tratamiento de la piel y remodelación de los rasgos faciales en un solo dispositivo

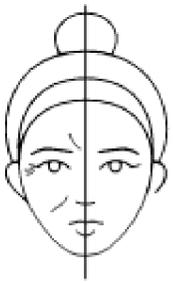


Resultados permanentes visibles e inmediatos

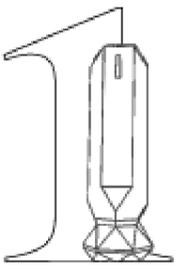

Líderes en el mercado en innovación de dispositivos domésticos



TUSPA

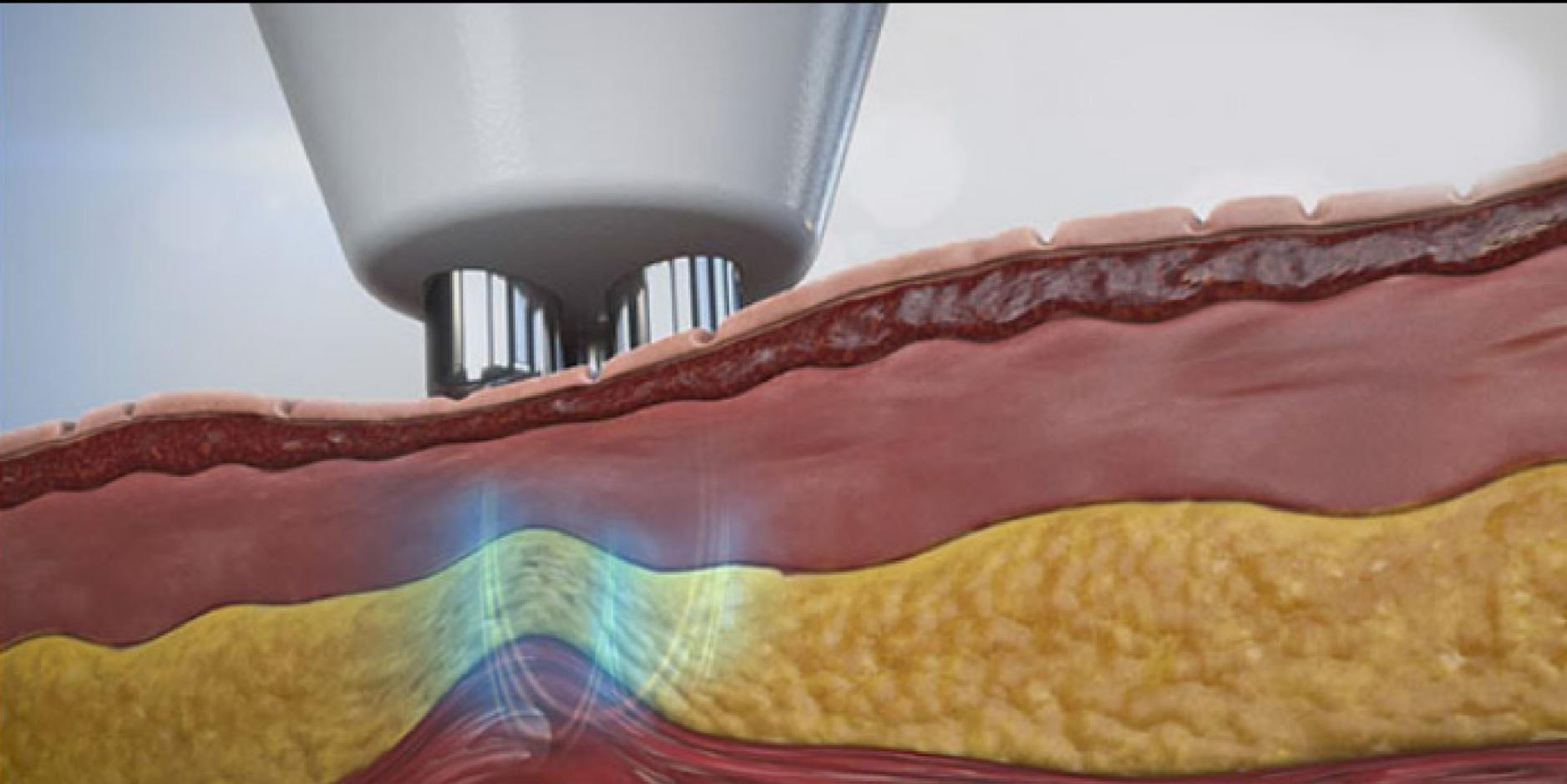


STOP Vx ofrece resultados impresionantes en un solo dispositivo. Al combinar las 2 tecnologías de radiofrecuencia múltiple y DMA, puede mejorar la textura de su piel y el tono muscular con muchos otros beneficios para su piel.

- Reduce significativamente las líneas finas y las arrugas.
- Levanta la piel flácida, mejorando el volumen muscular.
- Mejora la textura de la piel.
- Tonifica el área de la línea de la mandíbula (papada).
- Resultados anti-envejecimiento inmediatos y duraderos.
- Efecto clínico notable desde el primer tratamiento.



TUSPA

INSTRUCCIONES DE USO

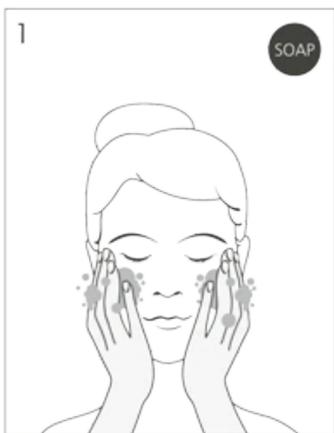

Para comenzar, limpie el rostro o el área de tratamiento específica



Aplique el gel de preparación TriPollar STOP Vx.



Mueva lentamente el dispositivo con movimientos circulares sobre cada área de tratamiento, calentando su piel a la temperatura óptima.



Mantenga los cuatro electrodos en contacto con la piel en todo momento. Repita hasta que se muestre la luz naranja y el indicador de sonido emita un pitido y muévase a un área adyacente.



Lave y retire el gel de preparación. Un tratamiento facial completo debería durar unos 20 minutos.

